


# REVYLINЕ RL 650

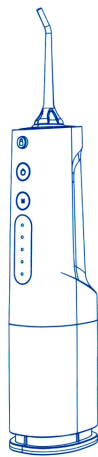

Ирригатор  
для полости  
рта

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопка блокировки/  
разблокировки насадки

Кнопка вкл/выкл  
(ON/OFF)

Переключатель выбора  
режимов работы (Mode)

Индикатор режима  
«Стандартный» (Normal)

Индикатор режима  
«Мягкий» (Soft)

Индикатор режима  
«Пульсирующий» (Pulse)

Индикатор режима  
«Программируемый» (DIY)

Сменная  
насадка

Светодиодная  
подсветка



Индикатор заряда  
батареи

Выдвижной  
резервуар  
для жидкости



### РЕЖИМ ИРРИГАЦИИ

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

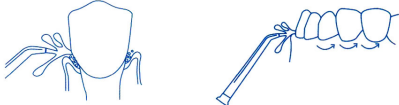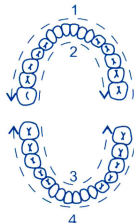

### ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИРРИГАЦИИ

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите прибор.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ИРРИГАТОРА

Ирригатор Revyline RL 650 удобно использовать в дорожных условиях, в поездках. Для удобства хранения и транспортировки конструкция прибора позволяет уменьшить его габариты. Для этого необходимо надавить на выдвижную часть резервуара до щелчка. **Внимание!** Перед тем, как подготавливать ирригатор к «дорожной» форме, необходимо протереть все детали устройства сухой салфеткой, чтобы избавиться от излишней влажности.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор. **Внимание!** В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге снизить срок его эксплуатации.

### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не погружайте работающее устройство в воду. Запрещено хранить жидкость в резервуаре. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды. **Внимание!** Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

### Поздравляем!

Уважаемый клиент, Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит Вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 650 **внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.**

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намочения USB кабеля.
4. Не используйте ирригатор, если есть повреждения USB кабеля или вилки зарядного устройства.
5. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
6. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
7. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
8. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
9. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
10. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
11. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
12. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
13. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
14. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
15. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
16. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием аккумулятора необходимо полностью зарядить в течение 8 часов. Используйте зарядное устройство с параметрами 5V, 1A (приобретается дополнительно). Выньте силиконовую заглушку из гнезда зарядки и вставьте в него разъем кабеля USB (убедитесь, что в гнезде нет жидкости). Подключите USB кабель к зарядному устройству, вставьте вилку в розетку электрической сети. Во время зарядки происходит мигание индикатора зарядки аккумулятора красным светом. Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор горит ровным зеленым светом до тех пор, пока прибор не отключен от сети. Для того, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, необходимо нажать и некоторое время удерживать кнопку Mode. Если уровень зарядки более 75%, загораются четыре

### НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

Стандартные насадки для регулярного использования – 2 шт. **Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено. После 3-6 месяцев регулярного использования насадки рекомендуются менять из соображений гигиены.

### ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор 2 года. Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

### Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие;  
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;  
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильно источнику питания;  
На товары, эксплуатировавшиеся с неустранными недостатками;  
На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими, как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;  
На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

### РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

#### Не извлекается насадка.

**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора. **Сложности выбора уровня напора струи.**

**Решение:** После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтологическую насадку. **Кровоточивость во время ирригации.**

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу. **Как предотвратить разбрызгивание воды?**

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом стекать из полости рта.

индикатора, при уровне 50-75% – три индикатора, при уровне 25-50% – два индикатора. Если уровень зарядки аккумулятора опустился ниже 25%, то горит только один индикатор DIY.

**Внимание!** Проверку зарядки следует проводить, когда устройство находится в режиме ожидания. Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Потянуть нижнюю поверхность резервуара вниз до щелчка. Это означает, что резервуар приведен в рабочее состояние (если резервуар установлен неправильно или не до конца выдвинута его движущаяся часть, может подтекать жидкость). После этого откройте отверстие резервуара и залейте через него воду. Заполнив емкость, закройте отверстие заглушкой. Нажмите кнопку ON/OFF. Для выключения ирригатора необходимо нажать на эту кнопку повторно.



### ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Устройство позволяет работать в четырех режимах давления жидкости:

**Стандартный режим (Normal).** Уровень давления струи жидкости рассчитан для регулярного использования, позволяет эффективно удалять остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков, с поверхности зубов. При использовании специальной пародонтологической насадки в данном режиме можно промывать зубодесневые карманы.

**Мягкий режим (Soft).** Рекомендован для использования при воспаленных деснах, повышенной чувствительности зубов.

**Пульсирующий режим (Pulse).** Обеспечивает гидромассаж десен, улучшает кровообращение в тканях.

**Программируемый режим (DIY),** позволяет самостоятельно выбрать необходимый уровень давления струи жидкости.

**Для того, чтобы установить необходимый уровень давления водной струи требуется:**

Кнопкой Mode выбрать режим DIY. Затем нажать и удерживать кнопку ON/OFF. Давление водной струи будет повышаться от минимального до максимального; Когда давление достигнет необходимого уровня, отпустите кнопку ON/OFF.

В дальнейшем при выборе режима DIY устройством будет работать на установленном уровне давления. Для того, чтобы изменить значения давления, проделанные действия необходимо повторить.

**Внимание!** При первом применении прибора рекомендуется использовать мягкий режим работы (Soft). Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части рукоятки и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

## ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINЕ

Модель: RL 650.

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

Уровень давления воды: от 200 до 820 кПа.

Частота пульсации: от 1 400 до 1 800 в мин.

Режимы работы: 4 (нормальный, мягкий, пульсирующий, программируемый).

Емкость резервуара: 360 мл.

Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик).

Влагозащита: IPX7.

Питание: литиевый аккумулятор 2 000 mAh.

Потребляемая мощность: 5 Вт.

Товар не имеет срока годности.

Средний срок службы: 5 лет.

Гарантия: 2 года.

Хранить при комнатной температуре.

### Комплектация:

Основной блок ирригатора Revyline RL 650;

Резервуар для жидкости;

Стандартная насадка – 2 шт.;

Кабель USB;

Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Произведено по заказу ИП Обушенок М.А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, корп. 1.  
Изготовлено: «Waterpulse (Shanghai) Industrial Co., LTD»  
China, Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати